


Podane ceny są cenami brutto

Blat laboratoryjny z laminatu hpl 120x75

Indeks: PRE 1275-0

Cena: 399 zł

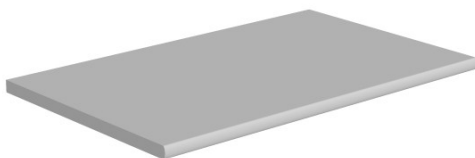

Blat laboratoryjny wykonany w technologii postforming z grubej płyty wiórowej pokrytej na zewnątrz jednomilimetrową warstwą laminatu hpl o podwyższonej odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej. Przednia krawędź blatu jest zaokrąglona i nie ma żadnych doklejek. Krawędzie boczne i tylna oklejone są listwą z pcv.

Blaty postformingowe najlepiej sprawdzają się tam, gdzie nie jest wymagana zbyt duża odporność powierzchni, jak np. na stołach pod aparaturę, na stanowiskach, na których nie używa się żadnych odczynników chemicznych, wszelkiego rodzaju stołach pomocniczych, czy też biurkach laboratoryjnych.

Na specjalne zamówienie **możliwe jest wykonanie blatów o nietypowych rozmiarach.**

Przy zamówieniu większej ilości - **cena do negocjacji.**

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia