


Podane ceny są cenami brutto

Blat laboratoryjny z laminatu hpl 180x60

Indeks: PRE 1860-0

Cena: 336 zł

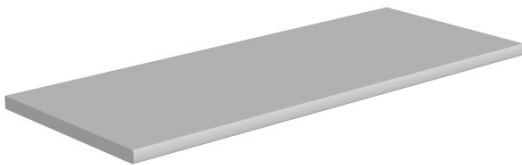

Blat laboratoryjny wykonany w technologii postforming z grubej płyty wiórowej pokrytej na zewnątrz jednomilimetrową warstwą laminatu hpl o podwyższonej odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej. Przednia krawędź blatu jest zaokrąglona i nie ma żadnych doklejek. Krawędzie boczne i tylna oklejone są listwą z pcv.

Blaty postformingowe ze względu na swą ograniczoną odporność chemiczną i fizyczną stosowane są przede wszystkim na stołach pod aparaturę, stołach pomocniczych oraz biurkach laboratoryjnych.

Na specjalne zamówienie **możliwe jest wykonanie blatów o nietypowych rozmiarach.**

Przy zamówieniu większej ilości - **cena do negocjacji.**

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia