


Podane ceny są cenami brutto

Blat laboratoryjny 180x75 z laminatu SPC

Indeks: MS 18075-0

Cena: 0 zł

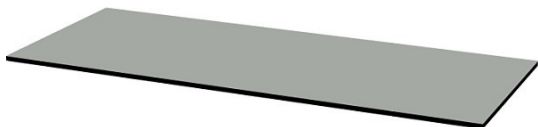

Blat laboratoryjny wykonany z laminatu ciśnieniowego spc grubości 16 mm.

Zobacz [test odporności chemicznej](#)

Składa się z twardego, czarnego rdzenia pokrytego obustronnie warstwą specjalnego papieru oraz żywicy melaminowej.

Rdzeń powstaje w wyniku prasowania włókien celulozowych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Otrzymuje się w ten sposób materiał trudnopalny, a przy tym nie wchłaniający wilgoci. Powierzchnia jest podwójnie utwardzona metodą bombardowania wiązką elektronów, dzięki czemu blaty wykonane z tego materiału charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną na kwasy i zasady oraz wyjątkową wytrzymałością na zarysowania i ścieranie.

Nadaje się też do kontaktu z żywnością, a w związku ze ściśle zamkniętą strukturą daje się łatwo czyścić i dezynfekować.

Blaty wykonane z laminatu SPC dobrze sprawdzają się w laboratoriach, pomieszczeniach higienicznych, instytutach badawczych, szpitalach, gabinetach lekarskich i innych obiektach wymagających absolutnej czystości i bardzo odpornej powierzchni.

Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie

blatów o nietypowych rozmiarach i kształtach.
Przy zamówieniu większej ilości - możliwość
negocjacji cen.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia